



Dietro ad ogni impianto  
ben messo c'è un Implantmed



# Implantmed W&H

Il vostro partner affidabile.  
Con Implantmed si eseguono  
interventi di chirurgia orale  
nei settori dell'implantologia,  
chirurgia orale, stomatologica  
e facciale in modo sicuro e con  
la massima precisione.  
L'unità motrice W&H è  
caratterizzata da un display grande

e ben leggibile, dalla funzione  
integrata di maschiatura e da  
un motore leggero e potente.  
Quest'ultimo, in combinazione  
con i manipoli e contrangolo per  
chirurgia W&H garantisce un  
bilanciamento perfetto. Anche il  
lavoro prolungato non causa  
affaticamento della mano.

Implantmed è gestito da un  
controllo al piede di facile impiego.  
Consente libertà di movimento  
ottimale ad entrambe le mani.  
Per concentrarvi sull'essenziale.  
Sui vostri pazienti.



- > Motore potente
- > Grande display, facilmente leggibile
- > Funzione integrata di maschiatura
- > Motore con cavo, termodisinfettabile e sterilizzabile





# Per l'impiego quotidiano

## Semplicità

Solo l'essenziale.

L'uso di Implantmed è estremamente semplice e senza operazioni complicate.


Azionando semplicemente i tasti Più e Meno si modificano i singoli valori, visualizzati in modo chiaro e leggibile sul grande display.



## Motore potente

La coppia di 5,5 Ncm e velocità del motore da 300 a 40.000 giri/min sono chiara dimostrazione della potenza di Implantmed.

La limitazione automatica della coppia, regolabile da 5 a 70 Ncm garantisce la necessaria sicurezza.

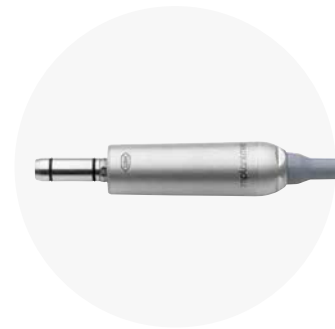

## Lavoro senza affaticamento

La combinazione tra motore leggero e contrangolo ergonomico è perfettamente bilanciata.

E' possibile lavorare per periodi prolungati senza affaticamento e crampi alla mano.



## Funzione integrata di maschiatura

La funzione di maschiatura agevola l'inserimento degli impianti in caso di osso particolarmente denso.

Grazie alla pre-maschiatura del foro, si minimizza la compressione dell'osso favorendo la perfetta guarigione del sito implantare.



# Accessori raccomandati: Manipolo e contrangolo per chirurgia



## LED+ W&H

### Più colore, più contrasto

L'indice di resa cromatica (IRC) è un fattore importante delle fonti di luce artificiale. Un IRC elevato migliora il benessere personale e la percezione visiva. Una resa cromatica perfetta si ha con un indice pari a 100. I LED convenzionali hanno un IRC compreso tra 60 e 80.

Questi LED presentano inoltre una quota troppo bassa di rosso. Gli strumenti per chirurgia a LED W&H utilizzano invece una nuova tecnologia. Ne risulta un IRC superiore a 90, che assicura una resa cromatica ricca di contrasti ed una riproduzione naturale delle tonalità del rosso in bocca.

# Dati tecnici

Eseguire la scansione  
del codice QR  
con il cellulare per  
maggiori informazioni  
su Implantmed



Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive  
illustrati non fanno parte della dotazione.

	Implantmed	Implantmed
Modello:	SI-923	SI-915
Coppia max. allo strumento rotante:	70 Ncm	70 Ncm
Tensione di rete:	220 – 240 V	100 – 130 V
Fusibile di rete:	2 x 250 V – T1,25AH	2 x 250 V – T1,25AH
Potenza meccanica resa max.:	70 W	70 W
Coppia max. sul motore:	5,5 Ncm	5,5 Ncm
Velocità motore nell'intervallo di tensione nominale:	300 – 40.000 min <sup>-1</sup>	300 – 40.000 min <sup>-1</sup>
Portata del fluido di raffreddamento al 100 %:	min. 90 ml/min	min. 90 ml/min
Controllo al piede:	S-N1	S-N1

## Controllo al piede S-N1

Con avanzamento programmi,  
inserimento / disinserimento della  
pompa del fluido di raffreddamento,  
rotazione sinistrorsa / destrorsa,  
funzione acceso / spento e  
regolazione continua del motore fino  
alla velocità massima preimpostata.



### Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.  
Via Bolgara, 2  
24060 Brusaporto (BG), Italia  
t + 39 035 66 63 911  
f + 39 035 66 63 939  
office.it@wh.com  
wh.com

W&H CH-AG  
Industriepark 9  
8610 Uster, Schweiz  
t + 41 43 4978484  
f + 41 43 4978488  
info.ch@wh.com  
wh.com